



SeniorTryghed® er et enkelt system, som er let at installere - og meget nemt at bruge..!



seniortryghed®



Kontakt SeniorTryghed® kundeservice:
Telefon 70 27 27 29
Kundeservice på mail:
service@seniortryghed.dk

Kundeservice er åbent på hverdage kl. 8.00 - 15.00.


SeniorTryghed®
Actas A/S
CVR: 29143625

Hobrovej 374
9200 Aalborg SV
info@seniortryghed.dk




Installations- og montagevejledning til SeniorTryghed®

Android

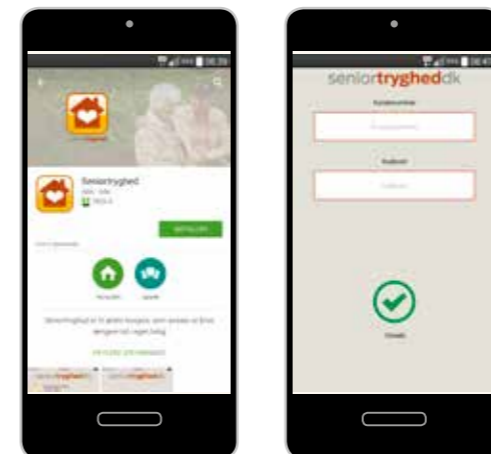


Hent Seniortryghed APP og tilmeld dig med kundeoplysninger.

iOS

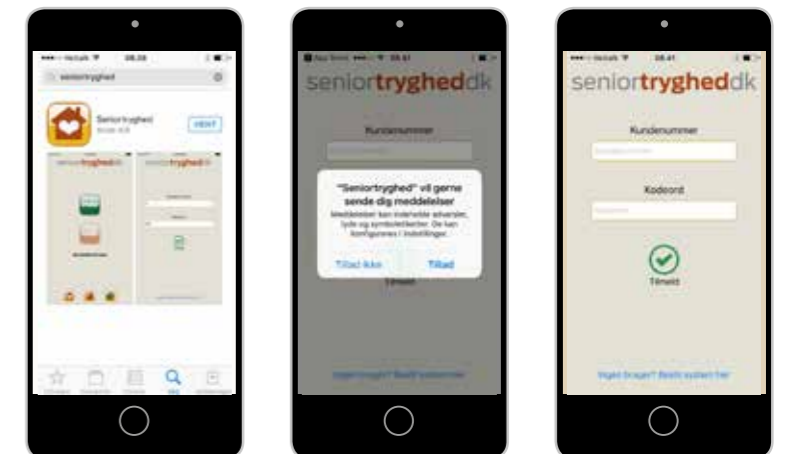


Hent Seniortryghed APP, tryk "Tilføj" og tilmeld dig med kundeoplysninger.


Indstillinger på seniortryghed.dk

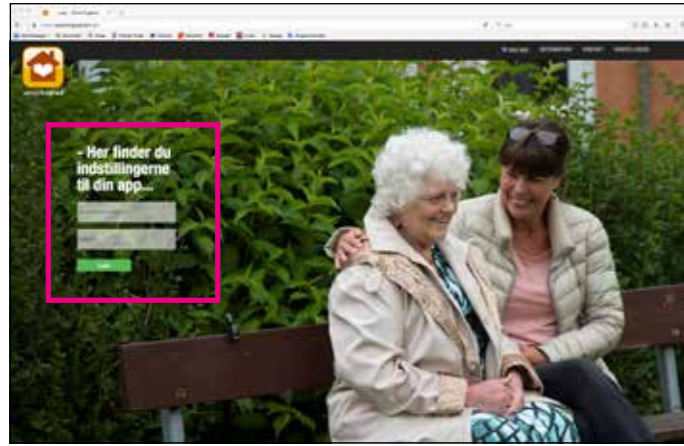


På seniortryghed.dk finder du dine indstillingsmuligheder under fanen "indstillinger". Her logger du ind med kundenummer og det kodeord, som du har fået tilsendt.

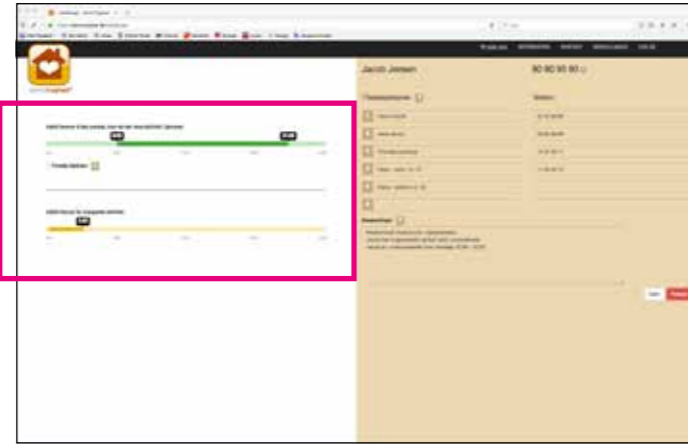


Du indstiller timeren til den periode, hvor der bør være aktivitet i hjemmet - eksemplet her viser kl. 6.00 til 21.00. Derefter indstiller du interval for varsel af manglende aktivitet - eksemplet her viser 3 timer. Der skal altså være aktivitet i hjemmet indenfor et interval på 3 timer i den valgte periode - ellers afgives der et tryghedsvarsel.

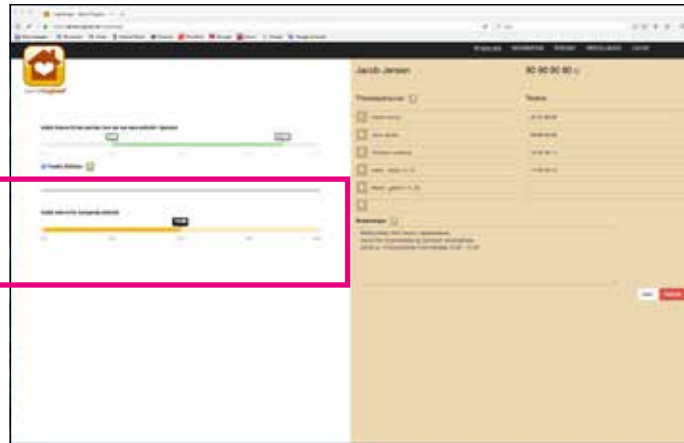


Du kan fravælge periodevælgeren og udelukkende vælge et fast interval for manglende aktivitet hele døgnet. I dette eksempel er der valgt 12 timer. Der skal altså være aktivitet i hjemmet indenfor et interval på 12 timer - ellers afgives der et tryghedsvarsel. Et mindre valgt interval kræver dermed hyppigere aktivitet i hjemmet.

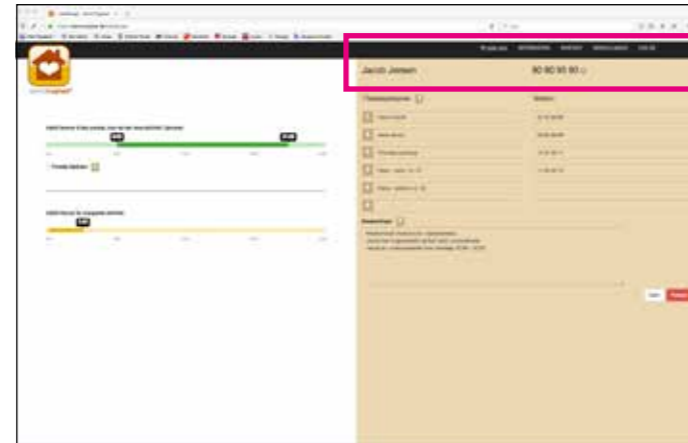

Som administrator redigerer du her brugerens (den person, som har SeniorTryghed® installeret i hjemmet) navn og kontaktoplysninger.

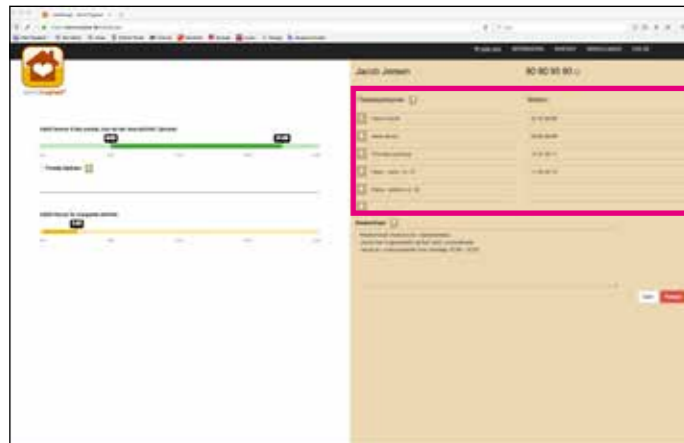

Her skriver du kontaktoplysninger på pårørende og andre tilkaldepersoner, som har betydning for brugeren. Tilkaldepersonerne vises herefter på din telefons display. Disse tilkaldepersoner modtager IKKE varsel, men kan kontaktes af varselsmodtager ved at trykke på nummeret. SeniorTryghed® fungerer i praksis som en lynhurtig, elektronisk telefonbog. Du kan altid rette eller tilføje kontakter under "indstillinger".

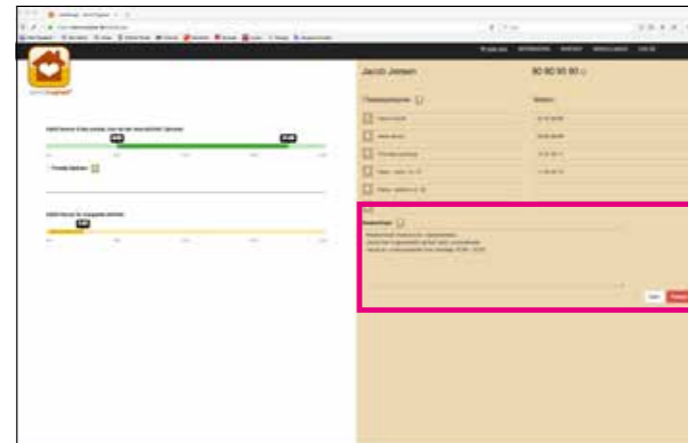

Under bemærkninger kan du skrive korte bemærkninger - fx hvor der ligger en ekstranøgle, medicinoplysninger o. lign. Bemærkningerne vises herefter på din telefons display. Du kan altid rette eller tilføje på bemærkningerne under "indstillinger".

Montering i hjemmet



1. Æsken indeholder TryghedsCentral med simkort, strømforsyning og ophæng, TryghedsSensor med ophæng samt TryghedsKald monteret i keyhanger.



2. Start med at montere ophænget til TryghedsCentralen fx i entréen eller et andet ugeneret sted. Bemærk, at den medfølgende strømforsyning skal kunne nå en stikkontakt.



3. TryghedsCentralen klikkes fast på ophænget. Strømforsyningen monteres og sættes i stikkontakt.



4. Montér ophænget til TryghedsSensoren højt i det rum, hvor du ønsker bevægelsesmønstret registreret.



5. TryghedsSensoren klikkes fast på ophænget.



6. TryghedsKaldet er klar til brug.